


ENFit® Procedimientos de limpieza

Juegos de extensión de tubos de alimentación de bajo perfil


Consejos para mantener limpios los puertos de los tubos de alimentación ENFit. ¡Inspeccione antes de conectar!

- **Juegos de alimentación de cebado** - Detenga el cebado antes de que el líquido alcance el final del tubo.
- **Preparación de jeringuilla de ENFit** - Limpie la medicación y la nutrición de la punta y las roscas externas; mantenga los líquidos fuera del espacio muerto antes de conectar al tubo de alimentación.

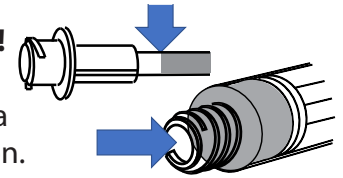


Para obtener los mejores resultados, siga estas instrucciones para limpiar los tubos al menos una vez al día o siempre que haya material visible.


Suministros y términos para la limpieza de tubos

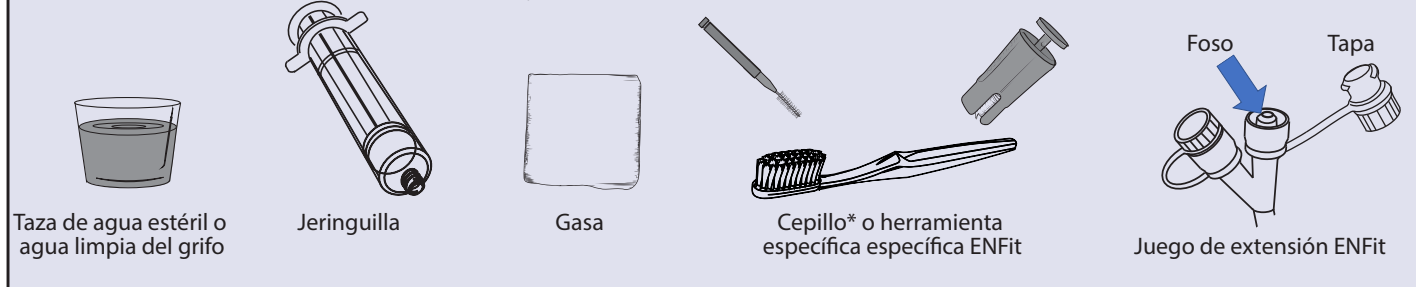


Nota: Use un cepillo desechable o siga las instrucciones del fabricante si utiliza el cepillo de limpieza específico de ENFit.

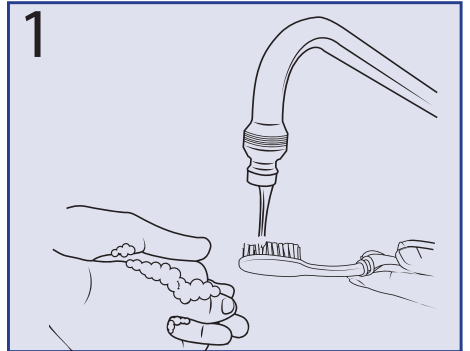


1
Lávese las manos con jabón y agua o use guantes. Enjuague el cepillo con agua del grifo.

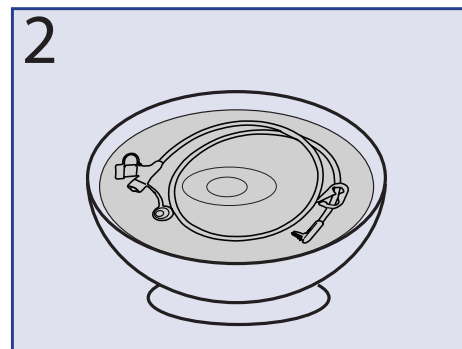


2
Desconecte el conjunto de extensión, remoje en agua limpia o enjuague bajo el grifo durante al menos un minuto.

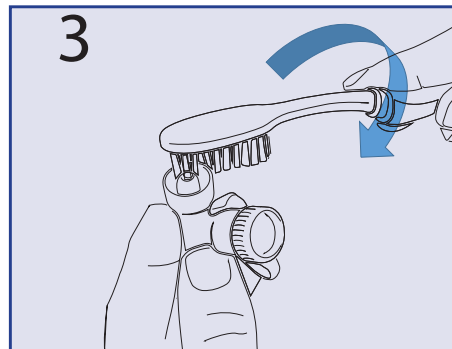

3
Moje el cepillo de dientes y gírelo en el fondo del foso y las ranuras de la tapa durante 15 segundos.

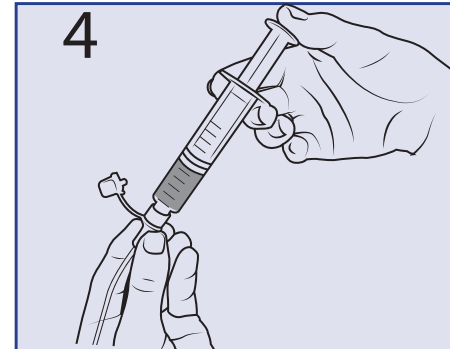

4
Llene la jeringuilla y luego enjuáguela o lávela con agua limpia del grifo.

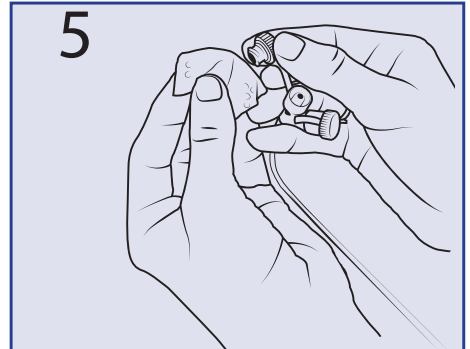

5
Limpie el puerto y la tapa del tubo de alimentación con gasa para secarlos. Limpie los suministros y permita que se sequen al aire.

* En algunas jurisdicciones, los cepillos de dientes manuales están regulados como dispositivos médicos diseñados para quitar los escombros de los dientes. Consulte a su proveedor de atención médica con licencia o a su Gerente de Riesgos en relación con el uso recomendado para la limpieza de los puertos de los tubos de alimentación. Deseche los dispositivos de un solo uso según las instrucciones. Procedimientos de limpieza cortesía de Children's Mercy Kansas City.
© GEDSA 2018 ENFit es una marca federalmente registrada de GEDSA .